

DE Technische Daten:

Art.-Nr. 12 300 Badewannen-Einstieghilfe			
Material:	Edelstahl korrosionsbeständig, Kunststoff	Griffhöhe über Wannenrand:	ca. 17 cm
Farbe:	chrom / weiß	Gewicht:	ca. 1 kg
Höhe:	ca. 42 cm	max. Belastbarkeit:	ca. 100 kg
Breite:	ca. 30 cm	Passend für Bade- wannen-Randstärke:	ca. 5 - 12 cm

EN Technical specifications:

Item No. 12 300 Bathtub Bar			
Material:	Corrosion-resistant stainless steel, plastic	Handle height above bathtub edge:	approx. 17 cm
Colour:	chrom / white	Weight:	approx. 1 kg
Height:	approx. 42 cm	max. load capacity:	approx. 100 kg
Width:	approx. 30 cm	Suitable for bathtub rim thickness:	approx. 5 - 12 cm



Sundo Homecare GmbH
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen
Internet: <https://www.sundo-homecare.de>

Produkt und Verpackung sind gemäß den vor Ort
geltenden Bestimmungen zu entsorgen | Product and packaging must be disposed
of in accordance with local regulations

sundo
HOMECARE

► Montage- und Gebrauchsanweisung *User Manual*

Badewannen-Einstieghilfe *Bathtub Bar*

Art.-Nr. / Item No. 12 300

[HMV-Nr. 04.40.05.0010]



sundo
HOMECARE



Verwendungszweck:

Die Badewannen-Einstieghilfe dient dem sichereren Ein- und Aussteigen aus der Badewanne. Sie wird durch einfaches Aufstecken auf den Wannenrand und Anziehen der Feststellschrauben befestigt. Die Einstieghilfe darf nicht bei Greifschwäche, Kraftlosigkeit der oberen Extremitäten, Schwindel oder nicht vorhandenen mentalen oder körperlichen Fähigkeiten zum Gebrauch genutzt werden. Ziehen Sie zur Nutzung bei Bedarf eine Pflegeperson hinzu.

Montage:

- Der Bereich, in dem die Einstieghilfe angebracht werden soll, muss fett- und seifenrestfrei sein.
- Zuerst müssen die weißen Abdeckkappen von den Feststellschrauben ❶ entfernt werden.
- Lösen Sie nun die Feststellschrauben ❶.
- Setzen Sie anschließend die Badewannen-Einstieghilfe auf den Wannenrand auf (mit den kurzen Füßen nach innen).
- Jetzt werden die beiden Feststellschrauben ❶ angezogen.
- Überprüfen Sie nun durch Rütteln, Aufstützen etc. den sicheren Sitz der Badewannen-Einstieghilfe. Das Hilfsmittel darf nur bei ausreichender Stabilität verwendet werden.
- Zum Schluss werden die weißen Abdeckkappen wieder auf den Schraubenkopf gesetzt.

Achtung, nicht für Badewannen mit Kunststoffschürze geeignet!**Reinigung und Pflege:**

Die Badewannen-Einstieghilfe kann mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden, achten Sie hierbei bitte darauf, dass dieser keine Öle und Fette enthält. Bei Bedarf können handelsübliche, chlorfreie Desinfektionsmittel genutzt werden.

Wichtig: Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften der Hersteller zu beachten.


Die Nutzungsdauer beträgt ca. 10 Jahre, abhängig von der Nutzungshäufigkeit und des Produktzustands.

⚠ Sicherheitshinweise:

- Achtung, Produkt und Verpackung sind kein Spielzeug, Verletzungs- und Erstickengefahr! Lassen Sie Kinder damit nicht unbeaufsichtigt! Die Badewannen-Einstieghilfe nur zum vorgesehenen Zweck nutzen!
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg.
- Vor jeder Benutzung ist der sichere Sitz der Badewannen-Einstieghilfe zu überprüfen.
- Verwenden Sie keine öligen oder fettigen Badezusätze, da hierdurch die Rutschgefahr erhöht wird!
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Defekte Produkte dürfen nicht (mehr) genutzt werden.

Garantie:

Laut den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. Von der Garantie ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

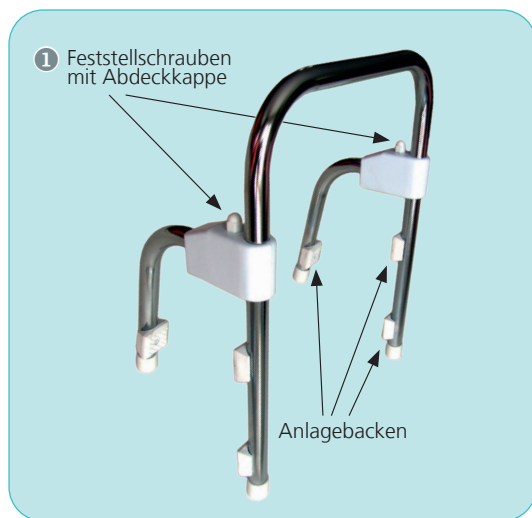

Technische Änderungen und Anbauten sowie unsachgemäße Wartungsarbeiten führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein.

Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen Verbesserung dienen.

Intended use:

The Bathtub Bar is designed to provide secure assistance when entering and exiting the bathtub. It is installed by simply placing it onto the edge of the bathtub and tightening the locking screws. This product must not be used by individuals with limited grip strength, weakness in the upper limbs, dizziness, or insufficient mental or physical capabilities. If necessary, assistance from a caregiver should be obtained.

Assembly:

- Ensure that the area where the Bathtub Bar will be mounted is free of grease and soap residue.
- First, remove the white caps from the locking screws ❶.
- Loosen the locking screws ❶.
- Position the Bathtub Bar onto the bathtub edge (with the shorter feet facing inward).
- Tighten both locking screws ❶ firmly.
- Check the stability of the bar by shaking it or applying pressure.
The device must only be used if it is securely and firmly attached.
- Finally, replace the white caps onto the screw heads.

Not suitable for bathtubs with plastic paneling!**Cleaning and disinfection:**

The Bathtub Bar can be cleaned using common household cleaning agents. Make sure that the cleaner contains no oils or greases. If needed, standard chlorine-free disinfectants may be used.

Important: Always follow the manufacturer's instructions when using disinfectants. The expected service life is approximately 10 years, depending on frequency of use and the condition of the product.

⚠ Safety instructions:

- Caution, product and packaging are no toys, risk of injury and suffocation! Do not leave children unattended with it! Only use the Bathtub Bar for its intended purpose!
- Maximum weight capacity: 100 kg.
- Check the secure fit of the safety rail before each use.
- Do not use oily or greasy bath additives as these increase the risk of slipping!
- Use original replacement parts only.
- Do not use damaged or defective products.

Warranty:

According to the statutory warranty claims. Excluded from the guarantee are defects resulting out of the natural wear and tear, intent, negligence or improper handling or use and defects which affect the value or usability of the tool only insignificantly.

We reserve the right of modifications serving the technical improvement.

